

PROCEDURE PERSONNE DEJA SUIVIE

Nous vous conseillons de recréer ce client en entrant **uniquement** les premières mesures que vous avez faites. En effet, l'important est de pouvoir constater l'évolution de la composition corporelle depuis ces premières mesures.

1. Aller sur la fiche de la personne dans l'onglet **Evolution**.
2. Cliquer sur l'œil. **Attention, date de la première mesure.**

NUTRI-CONSEILS

Madame Martine DUPONT

Masse

Volume Eau

	Poids	Grasse	Maigre	Musculaire	Total	Intra cellulaire	Extra cellulaire
Gestion des écarts >>>>	-11,2 kg	-6,7 kg	-4,5 kg	-1,5 kg	-3,0 l	-1,9 l	-1,1 l
Date 1ère mesure : 25/7/2015	94.6 kg	39.8 kg	54.8 kg	23.5 kg	39.8 L	20.4 L	19.4 L
Date dernière mesure : 3/11/2015	83.4 kg	33.1 kg	50.3 kg	21 kg	36.8 L	18.5 L	18.3 L

1

2. Cliquer sur l'œil

3. Imprimer la fiche
4. Quitter la fiche

Analyse d'impédancemétrie

3. Imprimer Quitter 4.

Mme Martine DUPONT

Age : 57 ans Type d'ossature :

Forte

Visualisation	Taille	Poids	Tour de taille	Tour de hanche
Départ	170 cm	94.6 kg	120 cm	117 cm
Aujourd'hui	170 cm	94.6 kg	120 cm	117 cm
Écarts :				

Mesure du 25 juillet 2015

Fréquence de mesure	5 kHz	50 kHz	100 kHz
Impédance mesurée	532 ohm	528 ohm	497 ohm

5. Aller dans l'onglet **Profil** de la personne.
6. Inactiver son compte.
7. Valider la modification.

NUTRI-CONSEILS

Mme Mlle M. **6.** Compte inactif

Prénom Martine

Nom DUPONT

Recherche

Profil

Mesure

Évolution

5

Coordonnées	Adresse	Mesures de départ	Commentaires
ID	90986	ID :	
Email	Adresse email		
Portable	Numéro de téléphone portable		
Domicile	Numéro de téléphone du domicile		
Bureau	Numéro de téléphone du bureau ou du travail		

Accès menus

Archives

7. Valider

Vous devez obtenir le message suivant :

Nom DUPONT

Coordonnées

Adresse

Mesures de départ

Commentaires

ID :

90986

Email

Adresse email

Accès menus

Archives

Modification effectuée !

Le profil de la personne est bien inactif.

Ensuite, vous allez recréer votre client **en entrant uniquement les données à la date de la première mesure.**

1. Cliquer sur + :




2. Rentrer le profil de la personne à la date de la première mesure puis valider.



La personne est de nouveau intégrée dans la liste des clients examinés.



3. Aller dans l'onglet **Mesure** de la personne.
4. Rentrer les valeurs à la date de la première mesure.
5. Cliquer sur « Calcul tableau »

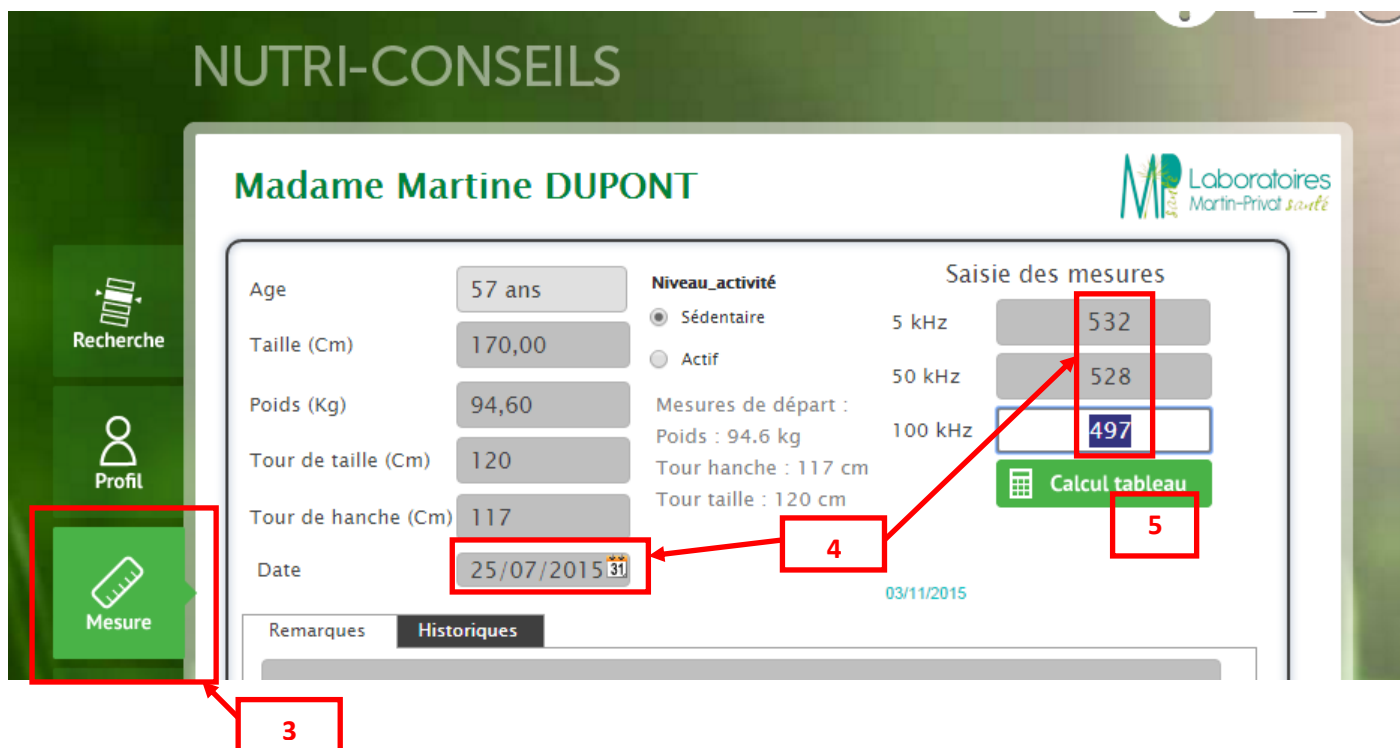

Vous obtiendrez alors le tableau suivant, qui vous redonne toutes les valeurs à la date de la première mesure.



Ensuite, il faut suffit de rentrer les mesures du jour pour suivre l'évolution de la composition corporelle depuis le début.